






RGiQVOtNX
NVOtNRFL
EUΘHPL

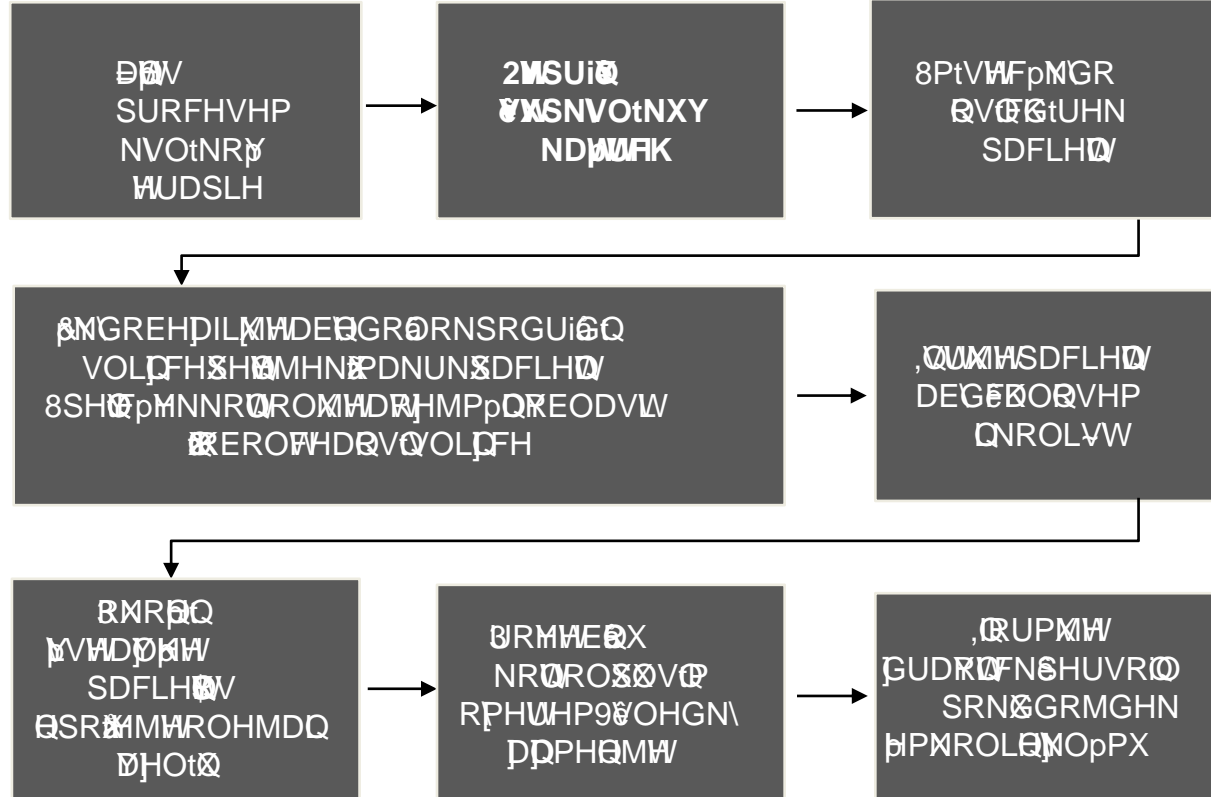

Nezapomínejte, že p i
každém kontaktu je
t eba nosit ochranné
rukavice.

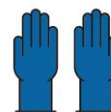

1HDSRPtθMMθISL
VwMSDFLHwHwED
QVLRFKθθEOHN

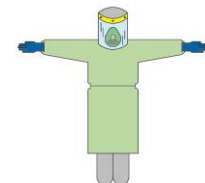





Podávání kyslíku běžnou kyslíkovou maskou




Kyslíková maska má boční otvory, kterými vydechaný vzduch odchází jednosměrnými ventily, aniž by dovnitř vnikl okolní vzduch. Zakrývá nos, ústa i bradu pacienta. Upevňuje se na temeni hlavy pomocí elastického pásku a v oblasti nosu pomocí kovového kolíku.

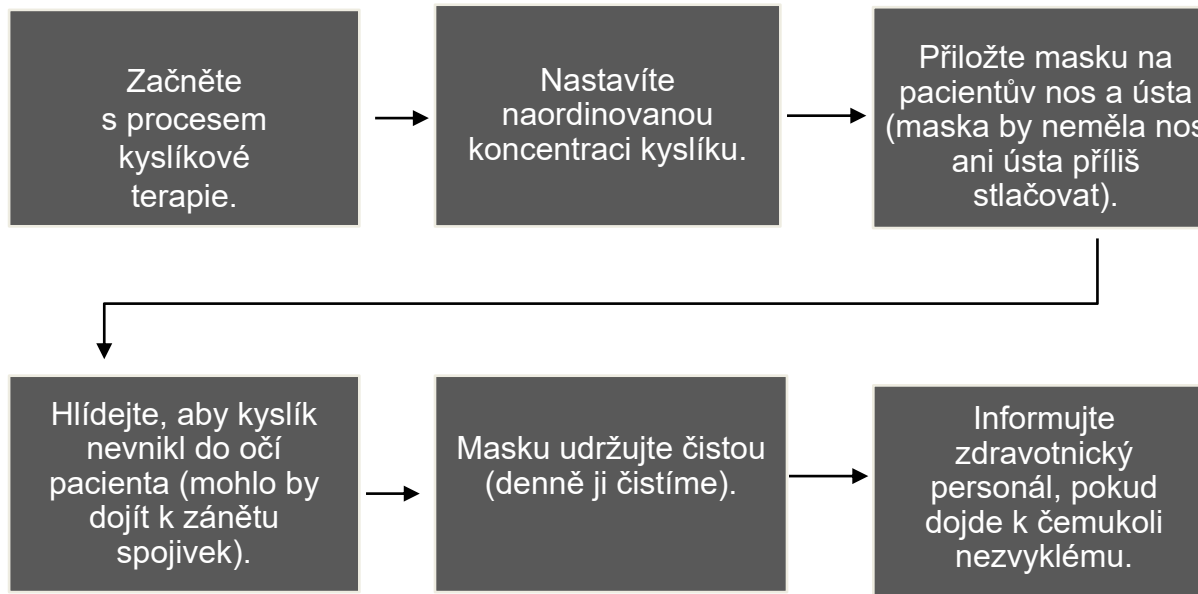

Nezapomínejte, že při každém kontaktu je třeba nosit ochranné rukavice.

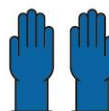

Nezapomínejte, že při styku s pacienty, je třeba nosit ochranný oblek.

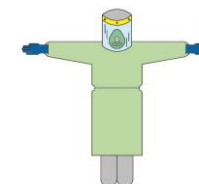



Podávání kyslíku kyslíkovou maskou se zásobníkem



Jedná se o jednoduchou masku, kde je mezi zdrojem kyslíku a maskou připojený zásobník o objemu nejméně 1 litr. Jednosměrný ventil zabraňuje vniknutí vydechaného vzduchu do zásobníku.

Nastavte naordinovanou koncentraci kyslíku.

Zásobník musí být neustále naplněný vzduchem, aby byl umožněn minimální průtok kyslíku. Před upevněním masky na pacienta zásobník nafoukněte.

Na zásobníku musí být správně umístěné expirační ventily, aby se zabránilo vniknutí vydechaného CO².


Přiložte masku na pacientův nos a ústa (maska by neměla nos ani ústa příliš stlačovat).

Hlídejte, aby kyslík nevníkl do očí pacienta (mohlo by dojít k zánětu spojivek).


Masku udržujte čistou (denně ji čistěte).

Informujte zdravotnický personál, pokud dojde k čemukoli nezvyklému.

Nezapomínejte, že při každém kontaktu je třeba nosit ochranné rukavice.

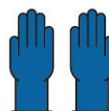

Nezapomínejte, že při styku s pacienty, je třeba nosit ochranný oblek.

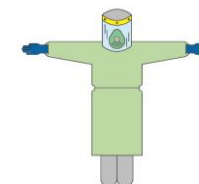

OBEČNÁ OPATŘENÍ



- Udržujte průchodnost dýchacích cest.
- Minimálně jednou za směnu zkontrolujte, zda podávaná koncentrace kyslíku odpovídá té naordinované.
- Hlídejte, že se v celém oběhu nehromadí vlhkost. Je třeba ji pravidelně odvádět směrem od pacienta, abychom snížili riziko infekce.
- Zkontrolujte, že v cévkách nejsou žádné zlomy nebo sekrece, které by kyslíkovému proudění bránily.
- Nejméně každých 8 hodin prohlédněte místa, kterými se maska nebo cévka dotýkají pacientovy pokožky. Na místa nadměrně netlačte, případně je vypolstrujte, abychom zabránili vzniku otlačenin.
- Zajistěte stálou vlhkost.
- Kontrolujte, zda celý oběh dobře těsní.
- Pokud má pacient suché a podrážděné sliznice, navlhčete mu nos nebo rty. Nepoužívejte vazelínu ani oleje.
- Cévky a aplikátory používané při léčbě pacienta měňte každých 48 hodin.
- Kyslíkové průtokoměry denně čistěte.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve zvlhčovací baňce. V případě potřeby ji doplňte.
- Během léčby kyslíkovými brýlemi s vysokým průtokem udržujte cévky níže, než je hlava pacienta.

Okysličení krve SpO² byste měli sledovat nepřetržitě, nejméně v intervalu každých 5 minut po každém zvýšení nebo snížení objemu kyslíku v krvi.

Hlídejte projevy příznaků otravy kyslíkem (drsný, suchý kašel, nepříjemné pocity na hrudi, necitlivost končetin, nevolnost nebo zvracení, únava, letargie nebo neklid).